

- 1) TERAPİ MODU (TENS, MASAJ VEYA EMS)
- 2) TERAPİ KISMI  
OMUZ, BOYUN, SIRT, DİRSEK, KALÇA,  
AYAK BİLEK,  
AYAK, EL BİLEK, DİZ... ETC
- 3) DURDURMA BİLDİRİMİ
- 4) SEÇME MODU BİLDİRİMİ
- 5) KANAL1 İÇİN NABIZ GENİŞLİĞİ VE  
ÇIKIŞ GÜCÜ
- 6) TEDAVİ SÜRESİ
- 7) KANAL2 İÇİN NABIZ GENİŞLİĞİ VE  
ÇIKIŞ GÜCÜ
- 8) DÜŞÜK PİL UYARISI
- 9) KİLİT GÖSTERGESİ

1) KANAL 1 İÇİN LED

2) KANAL 2 İÇİN LED

3) LED EKRAN

4) AÇMA / KAPAMA TUŞU

ÇALIŞMA MODUNDA TEDAVİYİ DURDUR, BEKLEME MODUNA GEİR

HAFIZA MODUNDA HAFIZADAN ÇIK, BEKLEME MODUNA GİR

AYAR MODUNDA AYARLARDAN ÇIK BEKLEME MODUNA GİR

5) KANAL1 ŞİDDET ARTTIRMA

KANAL 1 ŞİDDET ARTTIR

HAFIZA MODUNDA ÖNCEKİ VERİYE BAK

6) KULLANICI SEÇME MODUNDA U1 U2 ARASI GEÇİŞ

HAFIZA MODUNDA HAFIZADAKİ VERİYİ SEÇME VEYA SİLME

ÇALIŞMA MODUNDA PROGRAMI DURDUR VEYA DEVAM ETTİR

7) KANAL 1 ŞİDDET AZALTMA

AYAR MODUNDA SONRAKİ PARAMETREYİ SEÇME

HAFIZA MODUNDA SONRAKİ VERİYE BAKMA

8) (P) BEKLEME MODUNDA PROGRAM SEÇME

AYAR MODUNA GEÇİŞ İÇİN BAS VE BASILI TUT

9) KANAL 2 ŞİDDET AZALTMA

AYAR MODUNDA KULLANICI PARAMETRELERİ AYARLA

HAFIZA MODUNDA SONRAKİ VERİYE BAKMA

10) (S) SEÇME MODUNDA U1 U2 ARASI GEÇİŞ

BEKLEME MODUNDA TEDAVİ SEÇME

BEKLEME MODUNDA HAFIZA MODUNA GEÇİŞ İÇİN BASIN 3 SANİYE BEKLEYİN

HAFIZA MODUNDA HAFIZA VERİSİNİ SİLMEK İÇİN 3 SANİYE BASILI TUTUN


11) KANAL2 ŞİDDET ARTTIRMA

AYAR MODUNDA KULLANICI PARAMETRELERİ AYARLAMA

HAFIZA MODUNDA ÖNCEKİ VERİYE BAKMA

12) MODLAR ARASI GEÇİŞ

TENS EMS VEYA MASAJ MODU SEÇME

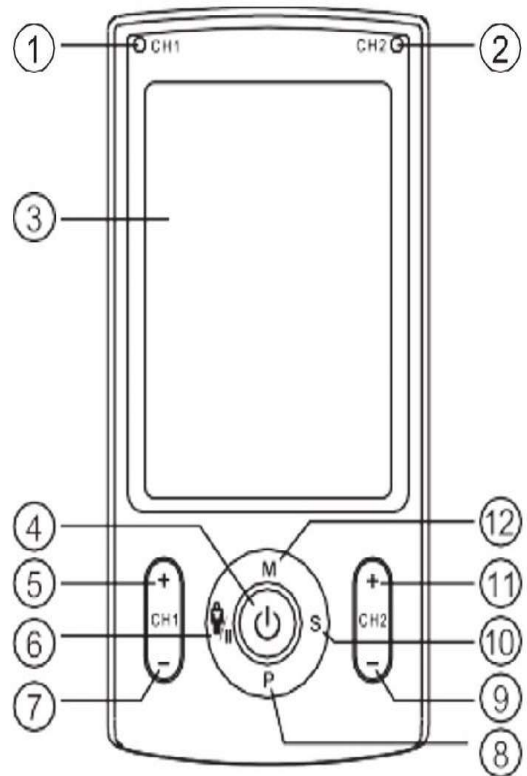

## **KULLANMA TALİMATLARI**

1) 4 ADET AAA KALEM PİL KULLANINIZ. PİİLERİN DOĞRU TAKILDIĞINDAN MUTLAKA EMİN OLUNUZ

2) ELEKTRODLARI KABLOLARA TAKINIZ

3) ELEKTRODLARI TAKTIĞINIZ KABLOLARI CİHAZIN ÜST KISMINDAKİ YUVALARA TAKINIZ

4) ELEKTRODLARI VÜCUTTA TEDAVİ UYGULANACAK KISMA DOĞRU ŞEKLİDE YAPIŞTIRINIZ

5) CİHAZI AÇINIZ, İLK DEFA KULLANCAKSANIZ MUTLAKA ÖNCE KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİ ŞEKİLDE OKUYUNUZ

6) 6 NOLU TUŞA BASARAK U1 VEYA U2 ARASINDA SEÇİM YAPABİLİRSİNİZ. (M) TUŞU İLE TENS EMS YA DA MASAJ MODLARI ARASINDA SEÇİM YAPABİLİRSİNİZ.

SEÇİM YAPTIĞINIZ ZAMAN EKRANDA YANIP SÖNDÜŞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ

7) (M) TUŞU İLE 9 UYGULAMA ARASINDA GEZİNEBİLİRSİNİZ. YİNE YANIP SÖNDÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ

TOPLAMDA 3 TERAPİ MODU, HER MOD 9 TERAPİ BÖLGESİ BARINDIRIR. HER 9 BÖLGE KENDİ İÇİNDE

3 VEYA 4 FARKLI PROGRAMI MEVCUTTUR.

TOPLAMDA 78 PROGRAM MEVCUTTUR. TENS VE EMS 27, MASAJ 24 PROGRAM MEVCUTTUR

(P) TUŞUNA BASARAK PROGRAMI SEÇİNİZ. LCD EKРАН YANIP SÖNECEKTİR

8) CH1 CH2 (-) VE (+) TUŞLARIYLA YOĞUNLUĞU ARTTIRIP AZALTABİLİRSİNİZ. ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN 20 SANİYE SONRA OTOMATİK OLARAK KİLİT MODU DEVREYE GİRER.

AÇMAK İÇİN CH1(-) VEYA CH2(-) TUŞLARINA BASINIZ

9) TENS VE EMS MODLARI 1ER ADET REVİZE EDİLEBİLİR MODU VARDIR.

BUNUN İÇİN CİHAZI AÇIN VE SEÇİM YAPMAK İÇİN (P) TUŞUNA BASIN. DAHA SONRA AYAR MODUNA

GİRMEK İÇİN (P) BASILI TUTUN. BU MODDA NABİZ ARALIĞI, NABİZ ORANI ZAMAN GİBİ

AYARLAR YAPABİLİRSİNİZ

A) PARAMETREYİ SEÇME NABİZ ARALIĞI, NABİZ ORANI ZAMAN GİBİ AYARLARI SEÇMEK İÇİN CH1(-) TUŞUNA BASIN

B) PARAMETRE AYARLAMA. AYARLAMA İÇİN CH2(-) YA DA CH2(+) TUŞUNA BASIN. BEKLEME MODUNA GELMEK İÇİN AÇMA/KAPAMA TUŞUNA 1 KEZ BASIN

## **HAFIZA KONTROLÜ**

CİHAZ BÜTÜN VERİLERİ SİZ TEDAVİYİ BİTİRDİKTEN SONRA HAFIZAYA ALICAKTIR

MAKS HAFIZA ADEDİ 30'DUR

HAFIZA DATAKARINI KONTROL İÇİN (S) TUŞUNA 3 SANİYE BASILI TUTUN CİHAZ HAFIZA MODUNA GİRECEKTİR

6 NO'LU TUŞA BASIN VE CH1 TUŞU İLE DATALAR ARASI GEZİNEBİLİRSİNİZ