


## LT7102A KULLANIM KILAVUZU

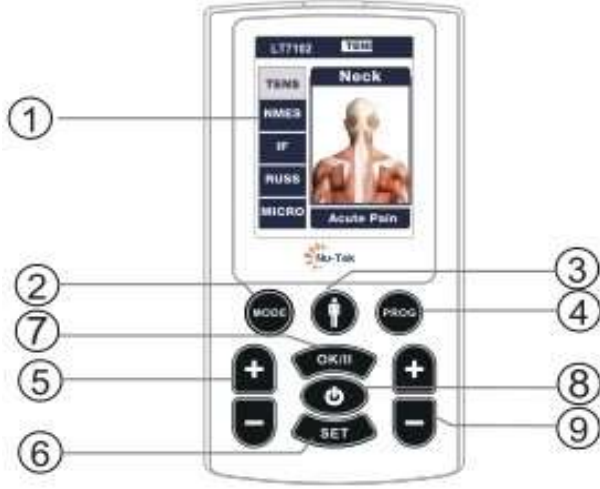

- 1) LCD EKREN. CİHAZIN ÇALIŞMA DURUMUNU GÖSTERİR
- 2) **MOD TUŞU**. TEDAVİ MODUNU SEÇER
- 3) VÜCUT BÖLÜMÜ TUŞU. TEDAVİ BÖLÜMÜNÜ SEÇMEK İÇİNDİR
- 4) PROGRAM TUŞU. TEDAVİ PROGRAMINI SEÇMEK İÇİNDİR
- 5) AYAR MODUNDA KANAL 1 İÇİN GÜÇ ARTTIRMA YA DA AZALTMA TUŞUDUR
- 6) SET TUŞU. BEKLEME MODUNDAN AYAR MODUNA GEÇİRİR
- 7) OK/II TUŞU BEKLEME MODUNDAN TEDAVİ MODUNA GEÇİRİR
- 8) AÇMA KAPAMA TUŞU. KAPATMAK İÇİN 3 SANİYE BASILI TUTUN
- 9) AYAR MODUNDA KANAL 2 İÇİN GÜÇ ARTTIRMA YA DA AZALTMA TUŞUDUR

## CİHAZIN KULLANIMI

- 1) AÇMA KAPAMA TUŞU İLE CİHAZI AÇIN
- 2) MOD TUŞU İLE TENS NMES IF RUSS MICRO SEÇİMLERİNİ YAPINIZ
- 3) 3 NO'LU TUŞ İLE TEDAVİ UYGULANACK BÖLGEYİ SEÇİN
- 4) PROG TUŞU İLE TEDAVİYİ SEÇİN
- 5) SET TUŞU İLE PARAMETRELERİ SEÇİN. YANDAKİ EKREN ÇIKACAKTIR  
(+) (-) TUŞLARIYLA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ PARAMETRELERİ AYARLAYIN  
SABİT PROGRAMLARDA SADECE ZAMAN AYARI DEĞİŞİR  
AYARLANABİLİR PROGRAMDA İSTEDİĞİNİZ PARAMETREYİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ
- 6) OK/II TUŞU İLE PROGRAMI BAŞLATIN. (+) (-) İLE YOĞUNLUĞU AYARLAYABİLİRSİNİZ
- 7) OK/II TUŞU İLE PROGRAMI DONDURABİLİR  
VEYA AÇMA KAPAMA TUŞU İLE PROGRAMI SONLANDIRABİLİRSİNİZ

## **GEÇMİŞ KULLANIMI GÖRMEK İÇİN;**

- BEKLEME MODUNDA MOD TUŞUNA 3 SANİYE BASILI TUTUN. BÜTÜN KAYITLARI SİLMEK İÇİN OK/II BASIN  
(+) (-) TUŞLARIYLA KİŞİSEL TEDAVİ KAYITLARINI GÖREBİLİRSİNİZ  
TEDAVİ SIRASINDA 30 SANİYE BOYUNCA EKRAHA BASILMAZSA CİHAZ KİLİT MODUNA GEÇER. TEDAVİ DEVAM EDER  
(-) TUŞUYLA KİLİDİ AÇABİLİRSİNİZ  
CİHAZ ŞARJ EDİLİRKEN ÇALIŞMAZ, ŞARJ SIRASINDA PİL GÖSTERGESİ TURUNCU OLUR  
ŞARJ BİTTİĞİ ZAMAN YEŞİLE DÖNER. NATARYANIN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN SADECE GEREKTİĞİ ZAMAN ŞARJ EDİNİZ

