



CELENMED MEDİKAL CİHAZLAR  
ve TIBBİ MALZEMELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

### UT 1032 KULLANMA KLAVUZU

- 1) CİHAZI SADECE TAVSİYE EDİLEN APARATLARLA KULLANINIZ.
- 2) CİHAZI YÜKSEK FREKANS YAYAN CİHAZLARA YAKIN YERLERDE KULLANMAYINIZ (ÖRN. MİKRODALGA)
- 3) CİHAZI RUTUBETTEN VE SUDAN UZAK TUTUNUZ. BANYODA KULLANMAYINIZ.
- 4) CİHAZI TEMİZLEMELİK İÇİN ÖZEL SOLVENTLER KULLANMAYINIZ, AKSİ TAKDİRDE DIŞ YÜZEY ZARAR GÖREBİLİR.
- 5) ZARAR GÖRMÜŞ BİR CİHAZ KESİNLİKLE DAHA FAZLA KULLANILMAMALIDIR.
- 6) CİHAZ SADECE YETKİLİ SERVİSLER TARAFINDAN AÇILMALI VE TAMİR EDİLMELİDİR.
- 7) CİHAZI YÖNETMELİĞE UYGUN ŞEKİLDE KULLANINIZ. KULLANMA KLAVUZUNU HER ZAMAN CİHAZLA BİRLİKTE TAŞIYINIZ
- 8) HAMİLE VE EMZİREN BAYANLAR KULLANIRKEN DİKKAT ETMELİDİR.
- 9) TAM GELİŞMEMİŞ KEMİK GRUPLARINDA KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMELİDİR.
- 10) SÜREKLİ VE ETKİLİ TEDAVİ SÜRESİ GÜNDE 30 DAKİKAYI GEÇMEMELİDİR.
- 11) CİHAZI KULLANIRKEN CEP TELEFONU KULLANMAYINIZ
- 12) JELİ GEREĞİNDEN FAZLA KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ.
- 13) KAROTİS SİNÜS SINIRLERİ ÜZERİNE UYGULANMAMALIDIR, ÖZELLİKLE DE BU SINIRLERDE HASSASİYETİ OLAN HASTALARDA.
- 14) TEDAVİ BOYUN VE AĞZA UYGULANMAMALIDIR.
- 15) BAŞINIZIN ÜZERİNE DİREK OLARAK UYGULAMAYINIZ, ŞAHDAMAR BÖLGESİNE UYGULAMAYINIZ.
- 16) CİHAZINIZI ŞIŞMIŞ, ENFEKTE OLMUŞ VE YANMIŞ BÖLGELERE UYGULAMAYINIZ. ÖRN: DAMAR İLTİHABI, VARİSLİ DAMAR...VS
- 17) KANSERLİ HÜCRE ÜZERLERİNE UYGULANMAMALIDIR.

### HASTA AŞAĞIDAKİ BİR YA DA BİRKAÇ HASTALIKTAN ÖTÜRÜ ŞİKAYETÇİ İSE, UT-1032 KULLANMAYINIZ

- 1) AKCİĞER TÜBERKÜLOZ
- 2) KARDİYOYASKÜLER RAHATSIZLIKLAR, ÖZELLİKLE DE SİNİR BOĞUMLARINDA
- 3) BEYİN VE OMURİLİK RAHATSIZLIĞI, ÖZELLİKLE YÜZEYSEL İSE
- 4) CİDDİ BÜTÜN VÜCUT SİSTEMİNEETK EDEN RAHATSIZLIK
- 5) ZARAR VERİCİ RAHATSIZLIKLAR
- 6) BAKTERİ, VİRÜS, MANTAR ENFEKSİYONLARINDA
- 7) DUYUSAL BOZUKLUĞA SAHİP VE REFLEKS KAYBI OLAN HASTALAR
- 8) AKLİ DENGESİNİ YİTİRMİŞ HASTALAR
- 9) METAL İMPLANT (TAVSİYE ALINIZ) VE ELEKTRONİK İMPLANT KULLANAN HASTALARDA (ÖRN: KALP CİHAZI)
- 10) GELİŞMİŞ DAMAR RAHATSIZLIKLARI
- 11) KATI KAN PIHTILAŞMASI RAHATSIZLIKLARINDA
- 12) CİDDİ DAMAR HASARLARINDAN DOLAYI KANAMA RİSKİ
- 13) DERİN DAMAR PIHTILAŞMASI
- 14) OSTEOPOROZ

BAHÇEŞEHİR ESTONŞEHİR 1. MAHALLE ERGUVAN SK. APT:10 D:2 BAŞAKŞEHİR/İST  
İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ 2040 296 179 - TİC. SİC. NO. 781 467


info@celenmed.com www.celenmed.com  
Tel: 0212 691 51 05 Faks: 0212 691 51 05  
0506 889 66 79 - 0532 786 71 03

15) X-RAY TARAFINDAN İYİLEŞTİRİLMİŞ KÖTÜ HUYLU TÜMÖR, HALEN TEDAVİDE OLAN YA DA TEDAVİYE ALINACAK OLAN RADYUM İZOTOP

**AŞAĞIDAKİ VÜCUDUN BÖLGELERİNE UT1032 UYGULAMAKTAN SAKININIZ**

- \* DİREK GÖZLERE TEMAS EDECEK ŞEKİLDE
- \* 5 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA
- \* İÇ VEYA DIŞ YUMURTALIK VE BEZE DOKULARINDA
- \* HAMİLELİKTE
- \* AKUT YARALANMALARDA
- \* TEDAVİ UYGULANAN BÖLGEDE AŞIRI ALEVLENME OLURSA
- \* DAMARLARDA AŞIRI ALEVLENME OLURSA
- \* ZARAR GÖRMÜŞ BÖLGELERDE

- (1) ZAMAN GÖSTERGE IŞIĞI
- (2) ZAMAN AYAR DÜĞMESİ
- (3) GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI
- (4) YOĞUNLUK GÖSTERGE IŞIĞI
- (5) MOD DÜĞMESİ
- (6) GÜÇ DÜĞMESİ
- (7) ULTRASON BAŞLIĞI
- (8) AC/DC ADAPTÖR BAĞLANTISI

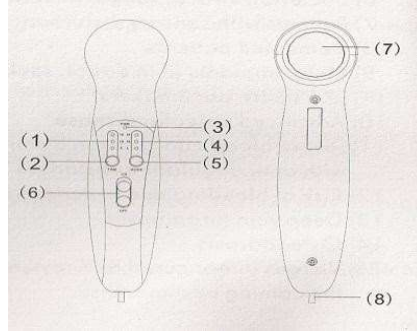

**CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER**

- (A) KULLANMA KLAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
- (B) AŞAĞIDAKİ KONTROLLERİ VE ÖLÇÜMLERİ YAPTIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ.

KONTROLLER	ÖLÇÜMLER	
ULTRASON BAŞLIĞININ ÜZERİNDE KIRIKLAR VEYA DELİKLER VAR İSE;	KULLANMAYI BIRAKINIZ VE TAMİR ETMEYİ DENEMEYİNİZ.	
ULTRASON BAŞLIĞININ YÜZEYİ TEMİZ VEYA SAĞLIKLI DEĞİL İSE;	KULLANMA KLAVUZU TALİMATLARINA GÖRE DEZENFEKTE EDİNİZ VEYA TEMİZLEYİNİZ.	
CİHAZI AÇTIKTAN SONRA LCD ÜZERİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ KONTROL EDİNİZ, EĞER BİR PROBLEM VAR İSE;	KULLANMAYI BIRAKINIZ VE TAMİR ETMEYİ DENEMEYİNİZ.	



CELENMED MEDİKAL CİHAZLAR

ve TIBBİ MALZEMELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TEMİZLEME VE DEZENFEKTE ETME

- 1) CİHAZINIZI ISLAK MENDİL YA DA NEMLİ BEZ PARÇALARI İLE TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ.
- 2) ULTRASON BAŞLIĞINI TEMİZLEME VE DEZENFEKTE ETME:  
KULLANMADAN ÖNCE HER SEFERİNDE DOĞAL DEZENFEKTE LİKÖRÜNÜN %80'İNİNİ KULLANINIZ YA DA MEDİKAL ALKOLÜN %70'İNDEN FAZLASINI KULLANINIZ VE DEZENFEKTE EDİNİZ.  
KULLANDIKTAN SONRA, BAŞLIĞI TEMİZLEMELİK İÇİN ISLAK MENDİL YA DA YUMUŞAK BEZ KULLANABİLİRSİNİZ.
- 3) CİHAZI TEMİZLEMEDEN ÖNCE MUTLAKA FİŞTEN ÇIKARINIZ, YUMUŞAK ISLAK MENDİLLE TEMİZLEYİNİZ. EĞER ÇOK KİRLİYSE DETERJAN YA DA TEMİZLEME SOLUSYONU EKLEYEBİLİRSİNİZ.

NOT:

ASLA SOLVENT KULLANMAYINIZ

TEMİZLİK GEREÇLERİ CİHAZA ZARAR VEREBİLİR.

PERİYODİK BAKIM İÇİN:

TEDAVİ BAŞLIĞI MUTLAKA KIRIKLARA VE ÇATLAKLARA KARŞI KONTROL EDİLMELİDİR

KABLOLAR VE BAĞLANTILAR MUTLAKA KONTROL EDİLMELİDİR.

#### UYGULAMA

AĞRIYAN BÖLGELERDEN HERHANGİ BİRİNİ SEÇİNİZ (KOYU RENKTE GÖSTERİLMİŞ) VE TEDAVİYE BAŞLAYINIZ.

GÜNDE 3 TEDAVİ TAVSİYE EDİLİR. MAKSİMUM 21 GÜN SONUNDA TEDAVİYİ SONLANDIRINIZ  
7 GÜNLÜK BİR MOLA VERİNİZ

AĞRI BÖLÜMLERİ VE İLGİLİ KISIMLARI UT1032 USER MANUAL KİTAPÇIĞINDA 12-13 VE 14. SAYFALARDA BULABİLİRSİNİZ.

CİHAZI UZUN BİR SÜRE KULLANMAYACAKSANIZ, ADAPTÖRÜ İLE BİRLİKTE KURU BİR ODADA MUHAFAZA EDİNİZ VE SICAK, GÜNEŞ VE NEMDEN UZAK TUTUNUZ.

#### Ultrason Cihazının Teknik Verileri

Çıkış gücü	:	1 MHZ ± %10	PROGRAM	ETKİ	DALGA
Nabız tekrar oranı	:	6.4 W ± %20			
Modulasyon dalga oranı	:	100 HZ ± %10	T	5%	ÇOK MİNİ
Dalga Formu	:	NABIZLI	L	30%	DÜŞÜK
4 seviye çıkış yoğunluğu	:	%5, %30, %40, %50	M	40%	ORTA
Zamanlayıcı	:	5 DK, 10 DK, 15 DK	H	50%	YÜKSEK
Etkili Alan (yüzey alanı)	:	4.0 cm <sup>2</sup> ± %20			
RBN (max)	:	5.0 ± %30			
Işın tipi	:	PARALEL			
Uygulayıcının malzemesi	:	ALUMİNYUM			

ÜRÜNLE DAHA DETAYLI BİLGİLERE VE VERİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN UT1032 USER MANUAL KİTAPÇIĞINA GÖZ ATINIZ.

BAHÇEŞEHİR ESTONŞEHİR 1. MAHALLE ERGUVAN SK. APT:10 D:2 BAŞAKŞEHİR/İST  
İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ 2040 296 179 - TİC. SİC. NO. 781 467

info@celenmed.com www.celenmed.com

Tel: 0212 691 51 05 Faks: 0212 691 51 05

0506 889 66 79 - 0532 786 71 03